

# Power Tower View – Alimentation complète du cabinet sur une surface d'installation minimale.



 **DÜRR  
DENTAL**

LE MEILLEUR, TOUT UN SYSTÈME

# Power Tower View – Une solution adaptée à chaque exigence

Air comprimé et aspiration combinés sur une surface d'installation minimale.

Le Power Tower View compact et silencieux s'intègre facilement dans le cabinet sur une surface de 0,4 m<sup>2</sup> seulement. Vous gagnez donc un espace précieux par rapport à l'installation d'appareils individuels – un plus, étant donné les prix des loyers actuels. Il s'adapte donc parfaitement à tous les cabinets avec un design élégant et un bruit de fonctionnement très discret. Le choix de son emplacement dans le cabinet est donc libre. Grâce à des options de configuration individuelles, le Power Tower View présente une solution flexible qui évolue avec le cabinet et s'adapte facilement à de nouvelles conditions.



## En haut l'air comprimé, en bas l'aspiration

En haut se trouve le compresseur, le cœur du cabinet, puissant et durable qui vous assure avec fiabilité un air comprimé hygiénique, sec et sans huile. En bas se trouvent les systèmes d'aspiration efficaces Dürr Dental en version « sèche » ou « humide » pour le traitement sans interruption, ergonomique et protégé des infections.

## Points importants :

- Ǻ Alimentation complète du cabinet sur une surface d'installation minimale grâce à un design compact, moderne et attrayant s'intégrant parfaitement aux locaux du cabinet
- Ǻ La sécurité de fonctionnement est optimisée grâce aux avertissements précoces et aux rappels de maintenance automatiques (des appareils toujours parfaitement entretenus, élimination rapide des défauts, télémaintenance)
- Ǻ Une commande de compresseur adaptée aux besoins offre un fonctionnement régulier
- Ǻ Adaptation des réglages de l'appareil selon les besoins du cabinet dentaire
- Ǻ Une faible intensité sonore - max. 55 dB(A), grâce à une isolation phonique performante
- Ǻ Un appareil adapté pour chaque cabinet grâce à des options de configuration individuelles
- Ǻ Utilisation pratique et intuitive de l'appareil



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL



GERMAN  
INNOVATION  
AWARD '21  
WINNER





## Écran et mise en réseau

L'écran tactile en couleur à haute résolution permet une utilisation agréable et un ajustement simple des réglages de l'appareil aux besoins du cabinet. Tous les systèmes s'intègrent facilement au réseau du cabinet et transmettent via le logiciel des messages d'état, des rappels de maintenance ou des messages d'avertissement. Vous améliorez ainsi la sécurité de fonctionnement du cabinet et gardez une maintenance toujours parfaite des appareils et un dépannage plus rapide, tout en bénéficiant de la possibilité d'une télémaintenance.



## Une solution avec extension possible

Le concept modulaire du Power Tower View offre des possibilités flexibles d'amélioration et de transformation. Vous pouvez par exemple l'équiper d'un groupe compresseur supplémentaire afin d'augmenter la puissance potentielle ou de créer des intervalles d'entretien réguliers pour une sécurité de fonctionnement optimale.

## Un pour tous – Tout en un

Le Power Tower View intègre dans une seule unité compacte le groupe compresseur, le réservoir d'air comprimé, le moteur d'aspiration, le dessiccateur à membranes et, selon les besoins du cabinet, le récupérateur d'amalgame. Ceci en respectant les propriétés thermiques et physiques de chaque élément. Le concept modulaire répond à plusieurs souhaits individuels et permet des configurations jusqu'à 4 utilisateurs. Ainsi, une solution adaptée est proposée pour toutes les tailles de cabinet.



# Données techniques en un coup d'œil


Praticiens	Moteur d'aspiration	Compresseur	2ème groupe compresseur en option	Récupérateur d'amalgame en option	Volume débité* À 5 bar [l/min] avec 1 groupe compresseur	Volume débité* À 5 bar [l/min] avec 2 groupes compresseur	Niveau sonore [dB(A)] pour une température ambiante de 35 °C	Tension [V]	Fréquence [Hz]	Dimensions (H x l x P) [cm]	Poids [kg]
2	VS 600	Duo	Oui	Oui	115	230	55	230	50	208 x 64 x 61	275
*3	VS 900 S	Duo	Oui	Oui	115	230	55	230	50	208 x 64 x 61	275
*3	VS 900 S	Duo	Oui	Oui	115	230	53	400	50	208 x 64 x 61	275
4	VS 1200 S	Duo	Oui	Oui	115	230	53	400	50	208 x 64 x 61	275
2	V 600	Duo	Oui	non	115	230	55	230	50	208 x 64 x 61	265
*3	V 900 S	Duo	Oui	non	115	230	53	400	50	208 x 64 x 61	265
4	V 1200 S	Duo	Oui	non	115	230	53	400	50	208 x 64 x 61	265

\*Volume débité mesuré sans air sec



## Accessoires


Pour trouver le bon filtre, rendez-vous sur la page Web : <https://www.duerrdental.com/produkte/druckluft/material-zubehoer/filterauswahl/>

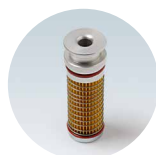

Filtre d'admission pour groupes compresseurs



Filtre bactériologique pour le dessiccateur à membranes

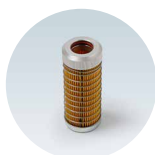

Filtre fin pour dessiccateur à membranes



Filtre à coalescence pour le dessiccateur à membranes

Dispositifs Médicaux de classe IIA CE0297. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur les notices. Produits non remboursés par les organismes de santé.